

Apollo ULN 400 Ultra low vriezer

Standaard uitrusting:

- RAL7012 / RAL 7035 gecoate buitenkant
- Binnenwerk rvs AISI 304
- 120 mm polyurethaan isolatie met HFC-vrij cyclopenthaan (inclusief VIP-paneel)
- VIP paneel in de zijwanden, achterwand en deur
- Cascade koelsysteem
- Milieuvriendelijk koudemiddel
- Dichte deur met dubbele vervangbare deurrubbers (extra rubber bevestigd aan het body)
- Rechtsdraaiende deur
- 4 geïsoleerde binnendeuren
- Elektronische temperatuurregeling met een 7 inch touchscreen op de deur, met een ingebouwd registratiesysteem voor de temperatuur en de bedrijfsparameters van het apparaat
- Mogelijkheid om de temperatuurinstelling elke 0,1k te wijzigen
- Zijhandgreep met geïntegreerd slot
- Visueel en geluidsalarm voor hoge en lage temperatuur
- Open deur alarm
- Alarmering vervuilde condensor
- Alarmering defecte temperatuursensor
- Alarmering bij uitval compressor
- Alarmering stroomuitval
- Alarmering reservebatterij
- Potentiaalvrij contact
- Schap geleiders / horizontale steunen
- 2 schappen van geperforeerd plaatstaal (verplaatsbaar)
- 1 schap van geperforeerd plaatstaal (vast)
- 2 sensor doorvoeren
- 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
- Automatische decompressieklep
- Gemakkelijke toegang tot condensorreiniging


Optionele uitrusting:

- Temperatuur recorder
- Extra schap geleiders / horizontale steunen
- Extra (geperforeerde) schappen
- Linksdraaiende deur
- Condensatorfilter

Technische data

	Breedte	Diepte	Hoogte
Externe afmetingen [mm]	754	1010 (915)	1997
Interne afmetingen [mm]	466	600	1320
Type koelunit	Intern		
Type koeling	Statisch		
Bruto inhoud	370 [ltr]		
Netto inhoud	230 [ltr]		
Gewicht	220 [kg]		
Maximale belasting	160 [kg]		
Aantal schappen	3		
Aantal geleiders / horizontale steunen	8		
Mogelijk aantal schappen	12		
Mogelijk aantal 50mm / 2"containers	264		
Maximale belasting schap	40 [kg]		
Temperatuurbereik	-40... -86 [°C]		
Omgevingsvoorwaarden	+25 [°C] op 60% HR		
Koudemiddel	R290 / R1150		
Spanning	230/50 [V/Hz]		
Aantal externe deuren	1		
Aantal interne deuren	4		
Dagelijks energieverbruik	14.7 [kWh/24h]		
Geluidsniveau	55 [dB]		
Opgenomen vermogen	1400 [W]		
Nominale stroom	6.1 [A]		
Tijd die nodig is om de temperatuur -80°C te bereiken	6 – 7 uur		

Afmetingen ULN 400

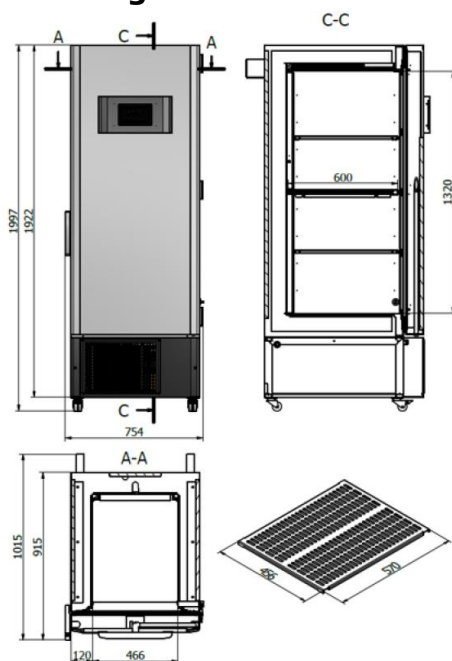

-  Milieuvriendelijk koudemiddel
-  8 sensor doorvoeringen
-  Elektronische temperatuurregeling
-  Alarm reservebatterij
-  4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
-  Automatische decompressieklep

